
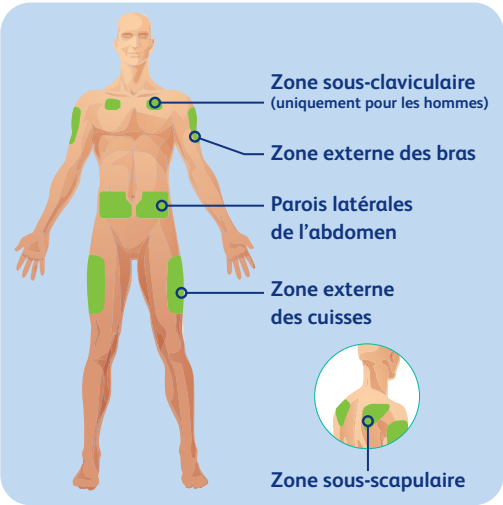


BD Saf-T-Intima™ une voie

Cathéter de sécurité de type microperfuseur pour la perfusion sous-cutanée

Recommandations d'utilisation

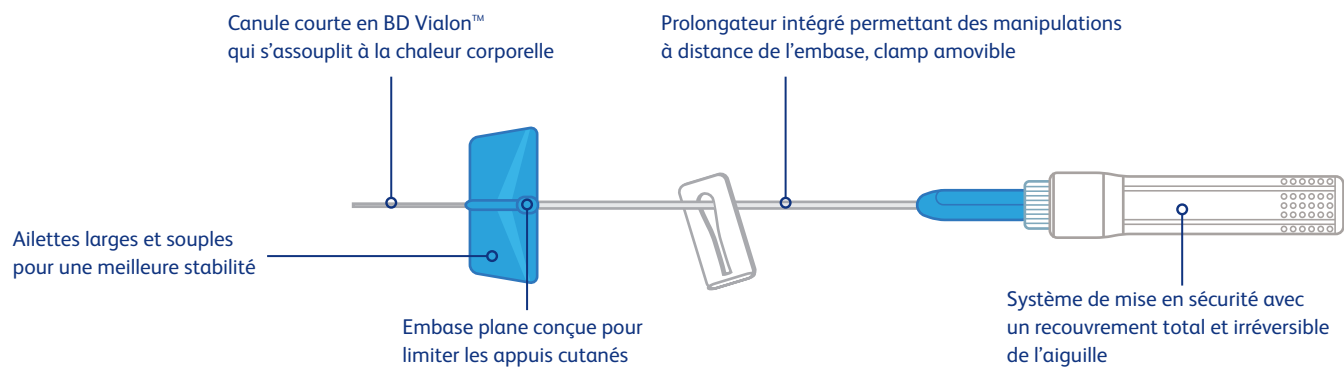


1 - Sélection du site de ponction

- Sélectionner le site de ponction
- Changer le site d'injection à chaque nouvelle pose de cathéter sous-cutané




R9. Avant l'insertion d'un cathéter périphérique, il est fortement recommandé de réaliser au moins une application avec une solution antiseptique alcoolique*.

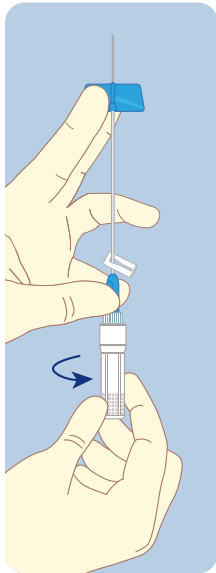



2 - Préhension

- Faire tourner l'embout transparent du système de sécurisation en maintenant les ailettes pour vérifier que la canule n'est pas thermocollée à l'aiguille
- S'assurer du positionnement du biseau vers le haut
- Le faible volume mort permet de ne pas avoir besoin de purger le cathéter avant la ponction.

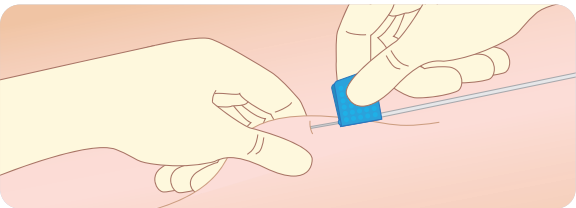

3 - Insertion

- Réaliser un pli cutané. En tenant les ailettes repliées par la face munie de picots, piquer avec un angle de 30° et insérer la totalité de l'aiguille pour atteindre le tissu sous-cutané

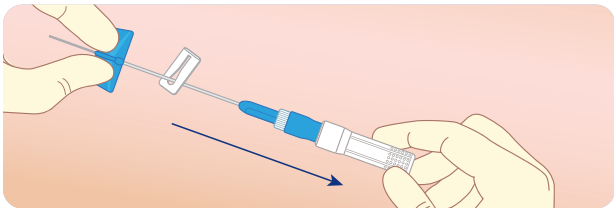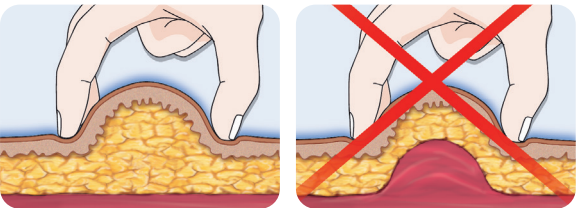


4 - Mise en sécurité

- Maintenir les ailettes à plat (face avec les picots en contact avec la peau) et tirer sur l'extrémité du fourreau de sécurité, côté picots, jusqu'à la mise en sécurité totale de l'aiguille

5 - Élimination

- Éliminer l'aiguille dans un collecteur

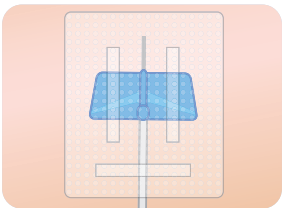

6 - Fixation

- Recouvrir d'un pansement stérile semi-perméable et transparent
- S'assurer que le clamp est bien retiré
- Il est conseillé de remplacer le bouchon en silicone par un bouchon simple ou une valve bidirectionnelle.

Points de vigilance

- Surveiller l'état cutané, le site d'insertion et le pansement de façon pluriquotidienne.
- Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de 1 000 ml à 1 500 ml/jour/site d'injection, sans dépasser 3 000 ml/24 h sur 2 sites différents (R45)*.
- Il est recommandé un débit maximum de 1 à 3 ml/min (R46)*.
- En cas de perfusion en discontinue, réaliser un rinçage pour éviter l'obstruction et les interactions médicamenteuses.**

*Revue officielle de la Société Française d'Hygiène Hospitalière. Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés Mai 2019.
**CCLIN Sud-Est, 2012, Fiche pratique, Protocole du CCLIN Sud-Est pour la pose d'un cathéter sous-cutané.

Engagés pour la santé de demain

BD, Le Pont de Claix, 38800

[bd.com/fr](https://www.bd.com/fr)



BD, le logo BD, et BD Saf-T-Intima sont des marques déposées de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs. ©2023 BD. Tous droits réservés. BD-93495. Becton Dickinson France S.A.S au capital de 64 719 915€ / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115



BD Saf-T-Intima™ 2 voies

Cathéter de sécurité de type microperfuseur pour la perfusion sous-cutanée

Recommandations d'utilisation

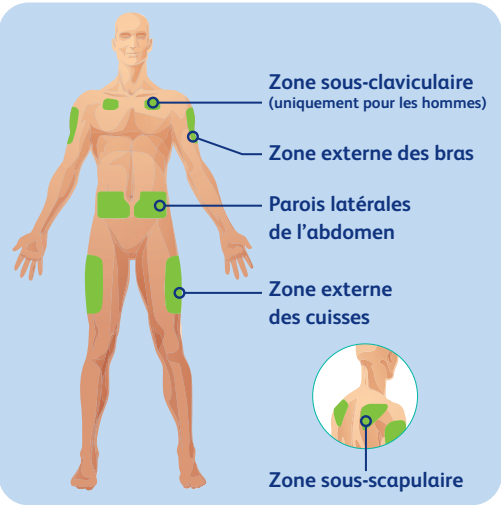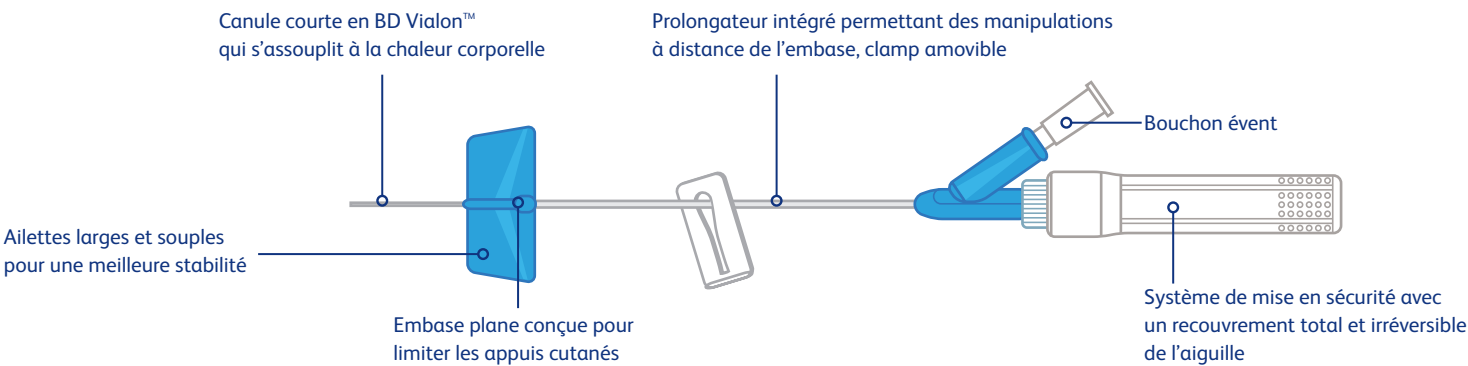


1 - Sélection du site de ponction

- Sélectionner le site de ponction
- Changer le site d'injection à chaque nouvelle pose de cathéter sous-cutané




R9. Avant l'insertion d'un cathéter périphérique, il est fortement recommandé de réaliser au moins une application avec une solution antiseptique alcoolique*.

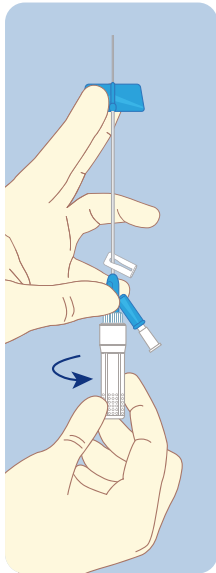



2 - Préhension

- Faire tourner l'embout transparent du système de sécurisation en maintenant les ailettes pour vérifier que la canule n'est pas thermocollée à l'aiguille
- S'assurer du positionnement du biseau vers le haut
- Le faible volume mort permet de ne pas avoir besoin de purger le cathéter avant la ponction.
- Il est toutefois possible de brancher la perfusion et de le purger avant la pose.

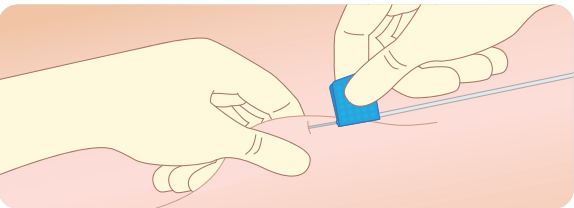


3 - Insertion

- Réaliser un pli cutané. En tenant les ailettes repliées par la face munie de picots, piquer avec un angle de 30° et insérer la totalité de l'aiguille pour atteindre le tissu sous-cutané

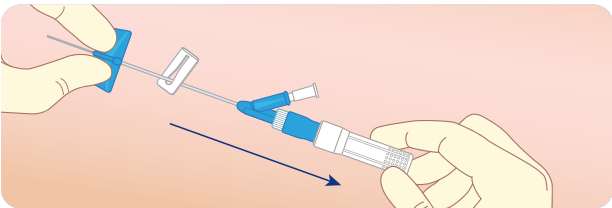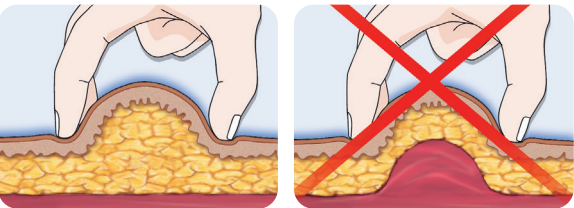



4 - Mise en sécurité

- Maintenir les ailettes à plat (face avec les picots en contact avec la peau) et tirer sur l'extrémité du fourreau de sécurité, côté picots, jusqu'à la mise en sécurité totale de l'aiguille

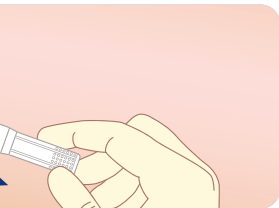

5 - Élimination

- Éliminer l'aiguille dans un collecteur

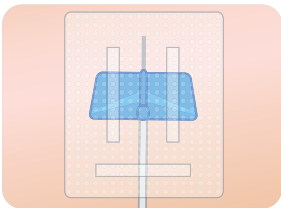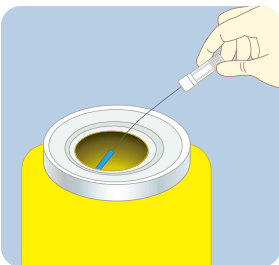

6 - Fixation

- Recouvrir d'un pansement stérile semi-perméable et transparent
- S'assurer que le clamp est bien retiré
- Il est conseillé de remplacer le bouchon en silicone par un bouchon simple ou une valve bidirectionnelle.
- Connecter la perfusion du côté du bouchon évent ou mettre un bouchon simple, si la perfusion est connectée ultérieurement

Points de vigilance

- Surveiller l'état cutané, le site d'insertion et le pansement de façon pluriquotidienne.
- Il est recommandé de ne pas dépasser la quantité de 1 000 ml à 1 500 ml/jour/site d'injection, sans dépasser 3 000 ml/24 h sur 2 sites différents (R45)*.
- Il est recommandé un débit maximum de 1 à 3 ml/min (R46)*.
- En cas de perfusion en discontinue, réaliser un rinçage pour éviter l'obstruction et les interactions médicamenteuses.**

*Revue officielle de la Société Française d'Hygiène Hospitalière. Prévention des infections liées aux cathéters périphériques vasculaires et sous-cutanés Mai 2019.
**CCLIN Sud-Est, 2012, Fiche pratique, Protocole du CCLIN Sud-Est pour la pose d'un cathéter sous-cutané.

Engagés pour la santé de demain

BD, Le Pont de Claix, 38800

[bd.com/fr](https://www.bd.com/fr)

BD, le logo BD, et BD Saf-T-Intima sont des marques déposées de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs titulaires respectifs. ©2023 BD. Tous droits réservés. BD-93497. Becton Dickinson France S.A.S au capital de 64 719 915€ / RCS Grenoble B 056 501 711 / Siret 056 501 711 00115

