



SURECAN® SAFETY II

AIGUILLE DE HUBER SÉCURISÉE

SURECAN® SAFETY II

L'aiguille de Huber sécurisée Surecan® Safety II est destinée à être insérée dans le septum d'une chambre implantable sous-cutanée pour la perfusion de solutions médicamenteuses.

CARACTÉRISTIQUES DE L'AIGUILLE

Ailettes ergonomiques

- Les ailettes offrent une bonne préhension, et une manipulation aisée lors de la ponction et du retrait
- Faible hauteur des ailettes pouvant se rabattre sur le plateau

Clamp avec code couleur selon la gauge

- Identification aisée de la gauge grâce à un code couleur
- Gauge et pression maximale mentionnées sur le clamp
- Le clamp permet un arrêt de la perfusion à tout moment

Base avec coussinet

- Epaisseur optimisée pour le confort du patient

Biseau tangentiel

- Conçu pour éviter le carottage du septum de la chambre implantable
- Favorise le bon maintien de l'aiguille dans le septum lors de l'injection haute pression



L'aiguille Surecan® Safety II est également disponible avec une VALVE CARESITE® EN Y.

Il s'agit d'une valve BIDIRECTIONNELLE à PRESSION POSITIVE. Elle participe à éviter le reflux sanguin vers le cathéter et donc, l'occlusion de ce dernier.

CARACTÉRISTIQUES DE LA VALVE CARESITE®

Septum pré-fendu

- Présence d'un septum pré-fendu, conformément aux recommandations de la SF2H (D'après R39 - Accord simple)¹

Surface plane

- Facilite la désinfection de la valve et participe au maintien des conditions d'aseptie optimales

Rainures sur le corps


- Facilite la prise en main

Corps transparent

- Facilite l'inspection visuelle de l'efficacité du rinçage, du bon écoulement de la solution et de la purge

Pré-connexion

- Evite des manipulations supplémentaires

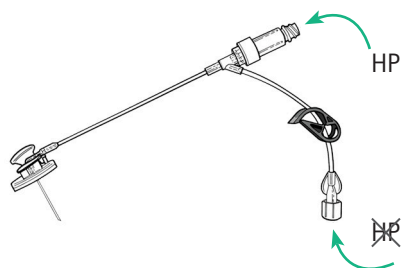

ATTENTION

Les injections à Haute Pression (HP) doivent être réalisées uniquement à travers la valve CareSite®

¹Prévention des infections associées aux chambres à cathéters implantables pour accès veineux, Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts, Promoteur : SF2H, Volume XX, N°1, Mars 2012, p.15-16

SÉCURITÉ

POUR LE PATIENT ET LE SOIGNANT

Base transparente

- Transparence de la base permettant une surveillance du site de ponction
- La base comporte des trous permettant une aération de la peau



Le dispositif de sécurité de l'aiguille Surecan® Safety II est activé manuellement au cours du retrait de l'aiguille. Il est conçu pour prévenir des piqûres accidentelles.

Point vert et "clic" de confirmation

- Point vert confirmant visuellement l'activation de la sécurité. Cette activation est également confirmée par un clic sonore
- Verrouillage irréversible grâce à l'encoche dans l'aiguille


Les aiguilles de Huber Surecan® Safety II sont

Sans
latex


Sans
DEHP

LES BONS RÉFLEXES DE MANIPULATION


POUR LA POSE

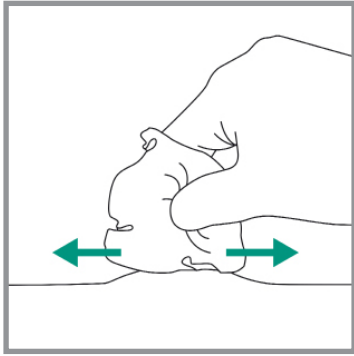


1. Désinfecter la zone de ponction sur le patient

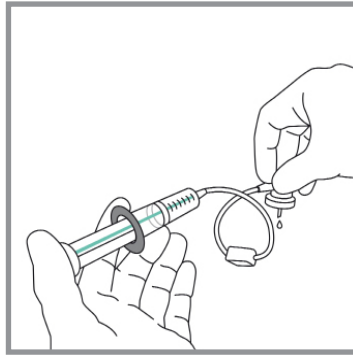

2. Purger l'aiguille à l'aide d'une seringue de NaCl à 0,9%

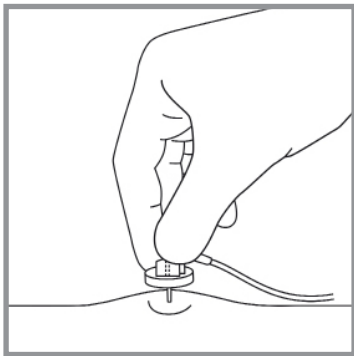


3. Insérer l'aiguille afin de traverser complètement et perpendiculairement le septum de la chambre

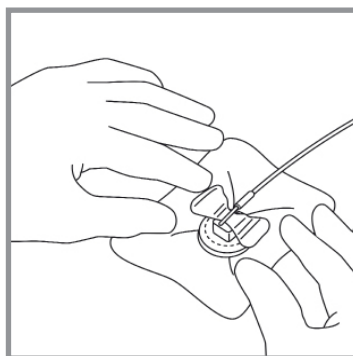


4. S'assurer de la perméabilité et couvrir le site de ponction avec un système de fixation

Se reporter aux référentiels en vigueur et aux notices d'instructions pour l'ensemble des recommandations liées à l'utilisation d'une aiguille de Huber

POUR LE RETRAIT

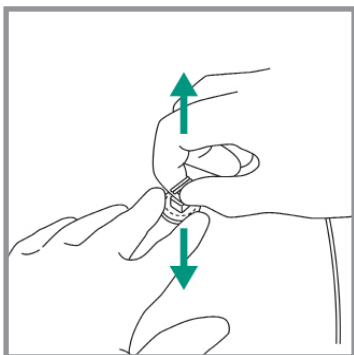

1. Stabiliser la base de l'aiguille avec deux doigts

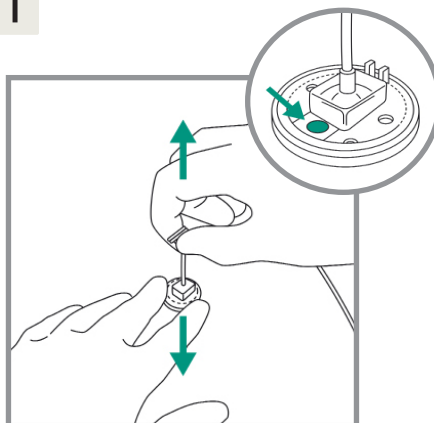

2. Retirer l'aiguille en tirant fermement sur les ailettes jusqu'à entendre un clic et jusqu'à l'apparition du point vert confirmant l'activation de la sécurité. Eliminer l'ensemble dans un collecteur pour objets tranchants


La CCI doit être rincée avant le retrait de l'aiguille, le retrait se fait tout en exerçant une pression positive (D'après R86 - Accord fort)¹.

¹Prévention des infections associées aux chambres à cathéters implantables pour accès veineux, Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts, promoteur SF2H Volume XX, N°1, Mars 2012, p.16

UNE GAMME COMPLÈTE

SURECAN® SAFETY II + CARESITE® EN Y

(boîtes de 20 unités)

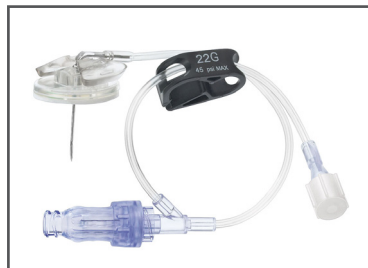

Longueur utile de l'aiguille

Taille de gauge	Volume d'amorçage (mL)	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	38 mm
■ 19G	0,43	04447057	04447045	04447046	04447047	04447048	04447049
■ 20G	0,35	04447058	04447050	04447051	04447052	04447053	-
■ 22G	0,33	04447059	04447054	04447055	04447056	-	-

SURECAN® SAFETY II SANS VALVE

(boîtes de 20 unités)



Longueur utile de l'aiguille

Taille de gauge	Volume d'amorçage (mL)	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	38 mm
■ 19G	0,31	04447042	04447000	04447001	04447002	04447003	04447004
■ 20G	0,25	04447043	04447005	04447006	04447007	04447008	04447009
■ 22G	0,19	04447044	04447010	04447011	04447012	04447013	-

CHOIX DE L'AIGUILLE

DIAMÈTRE EXTERNE

Le choix sur diamètre externe est fonction de la viscosité de la solution à perfuser et du débit souhaité¹. La SF2H (R35 – Accord fort) recommande fortement d'utiliser des aiguilles de Huber préférentiellement d'un diamètre de 22 Gauge même en cas de perfusion de médicaments visqueux (type nutrition parentérale, produit sanguin labile)² (R35, Accord Fort)². Si l'emploi d'une aiguille de 19 Gauge s'avère nécessaire, il est préférable de la retirer dès la fin de la perfusion (R35, Accord simple)².

LONGUEUR

Il est préférable d'utiliser une aiguille de Huber de type 2, c'est-à-dire munie d'un prolongateur afin de limiter les manipulations de l'embase de l'aiguille (R36, Accord Fort)² sauf pour les injections à haut débit en radiologie par exemple où, en l'absence d'une aiguille de type 2 compatible, l'aiguille de type 1 sans prolongateur sera préférée (R36, Accord Simple)².

La longueur de l'aiguille doit être adaptée à la profondeur de la chambre et à la corpulence du patient (R36, Accord Fort)².

De façon générale, les aiguilles courtes sont utilisées chez les patients de faible poids corporel, alors que les aiguilles longues sont utilisées chez les patients en surpoids.

A partir de ces informations, des exemples d'utilisation des aiguilles en fonction de leur longueur sont rassemblées ci-dessous. Ils sont données à titre indicatif.

LONGUEUR DE L'AIGUILLE	EXEMPLES
32 – 38 mm	Chambre profondément implantée Patients obèses
25 – 32 mm	Chambre implantable standard Patients en surpoids
20 mm	Chambre implantable standard Patients de poids normal
15 mm	Chambre implantable de petite taille Patients maigres ou dénutris
12 mm	Patients très maigres ou enfants

¹OMÉDIT Centre; Choisir une aiguille de Huber adaptée; http://www.omedit-centre.fr/chambreimplantable_web_gen_web/co/Aiguille_de_Huber__2_.html; (consulté en novembre 2023)

²SF2H, Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux. Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts. Promoteur : SF2H Hygiènes Volume XX - N°1 - Mars 2012

B. Braun prend 5 engagements
pour servir les clients au quotidien

Qualité

Simplicité

Proximité

Développement

Innovation

Car notre engagement au service de la santé, c'est d'abord un engagement envers nos clients.

Un engagement de **QUALITÉ** des solutions que nous leur offrons ; de **SIMPLICITÉ** de la relation avec eux et de **PROXIMITÉ** de nos équipes toujours à leur écoute ; et celui d'un véritable accompagnement pour **DÉVELOPPER** la performance de leurs activités grâce à une **INNOVATION** permanente.

L'aiguille de sécurité à biseau non carottant pour injection sous pression Surecan® Safety II est destinée à être insérée dans le septum d'une chambre implantable sous-cutanée pour la perfusion de liquides. Le dispositif de sécurité de l'aiguille Surecan® Safety II est activé manuellement au cours du retrait de l'aiguille. Il est conçu pour la prévention des piquûres accidentelles par l'aiguille.

Dispositif médical de classe IIa. Certificat CE délivré par G-MED (CE-0459).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation. Pour les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion à domicile dans le cadre des forfaits PERFADOM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), se reporter au site ameli.fr

Fabriqué par B. Braun Medical SAS, 26 rue Armengaud, 92210 Saint-Cloud, France

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Documents et photos non contractuels.

Document réservé aux professionnels de santé.

Edition Novembre 2023