




SURECAN® SAFETY II

POSTER DE MANIPULATION
(POSE ET RETRAIT)

POSE DE L'AIGUILLE SURECAN SAFETY II®

Ces étapes de manipulations constituent une proposition qui répond aux notices d'utilisation des produits concernés. Réaliser ces étapes tout en respectant les protocoles en vigueur dans l'établissement. Avant la manipulation, serrer tous les raccords ou les connecteurs sans aiguille avant l'utilisation de l'aiguille.

1 PREPARER LE SITE DE LA CCI*

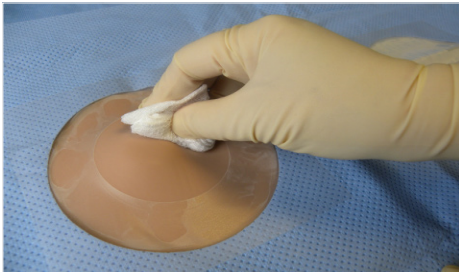


Préparer le site de la chambre implantable pour l'insertion de l'aiguille stérile.

DÉSINFECTER la zone autour de la chambre implantable avec un antiseptique alcoolique (d'après R.46 - Accord fort)¹ pendant minimum 30 secondes.

LAISSER SÉCHER².

2 RINÇAGE

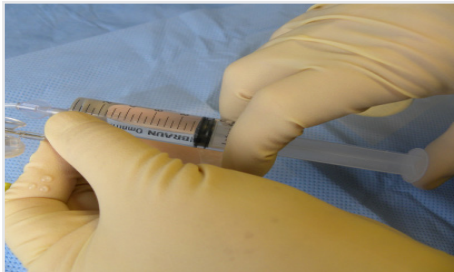


Fixer à l'aiguille une seringue de 10 ML contenant du **CHLORURE DE SODIUM (NaCl) À 0,9 %** (d'après R.42 - Accord fort)¹.

Saisir les ailettes et retirer la protection de l'aiguille.


AMORCER et **RINCER** l'ensemble pour perfusion.

3 INSERTION

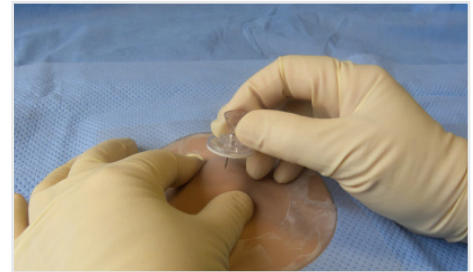

Localiser et maintenir fermement la chambre implantable avec 2 doigts. **MAINTENIR LES AILETTES** et insérer l'aiguille en traversant complètement et perpendiculairement le septum jusqu'à buter **SANS ÉCRASER** la pointe de l'aiguille sur le fond de la chambre (ne pas forcer).

4 REFLUX SANGUIN

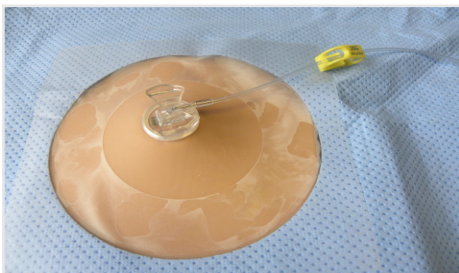

L'aiguille doit être à **PLAT** sur la peau. Les ailettes sont repliées à la base de la chambre implantable pour en réduire les mouvements.

VÉRIFIER LE REFLUX SANGUIN afin de confirmer la perméabilité du cathéter et le bon positionnement de l'aiguille.

5 FIXATION



Placer un **PANSEMENT** et sécuriser le site conformément au protocole de l'établissement. **FIXER LA LIGNE DE PERFUSION** au prolongateur et commencer l'injection, la perfusion ou l'aspiration sanguine conformément aux procédures de l'établissement.

Réglementaire R37 :

Pour tout geste sur la CCI* ou la ligne de perfusion, il est recommandé de n'utiliser que des seringues d'au moins 10 mL afin d'éviter une hyperpression qui pourrait endommager la CCI*¹

D'après R45 :

L'opérateur porte une blouse à usage unique, un masque de type chirurgical (Accord fort) et une coiffe (Accord simple). Il réalise une désinfection des mains par friction hydro-alcoolique et met des gants stériles au plus près du moment de la pose de l'aiguille (Accord fort)¹.

RETRAIT DE L'AIGUILLE SURECAN® SAFETY II EN PRESSION POSITIVE

Selon les recommandations de la SF2H, le retrait de l'aiguille doit se faire tout en exerçant une pression positive (d'après R86 - Accord fort)¹.

Avant de procéder au retrait de l'aiguille, vérifier le reflux sanguin par aspiration, puis procéder à un rinçage pulsé de la chambre.

INJECTER de manière pulsée environ 8 ml de NaCl à 0,9% ensuite dépiquer l'aiguille tout en injectant les 2ml de solution de NaCl à 0,9% restant³.



Se reporter aux référentiels en vigueur et aux notices d'instructions pour l'ensemble des recommandations liées à l'utilisation d'une aiguille de Huber.

1 STABILISER LA BASE DE L'AIGUILLE





Avec une main, tenir la seringue préremplie d'une solution de NaCl à 0,9% (dans laquelle il reste 2ml)³ dans la paume, tout en **STABILISANT LE PLATEAU DE L'AIGUILLE AVEC DEUX DOIGTS** (index et majeur). Le pouce est placé sur le piston de la seringue.

2 SAISIR LES AILETTES DE PRÉHENSION

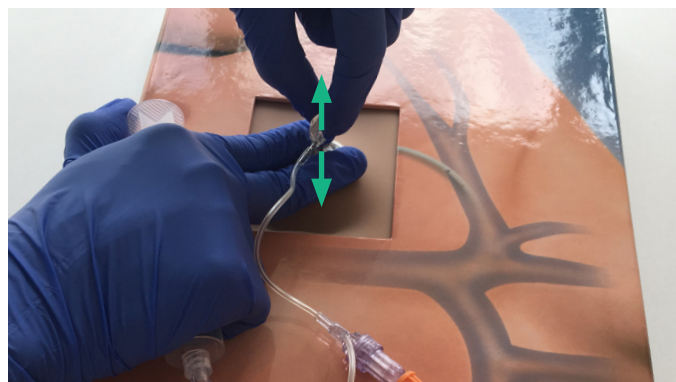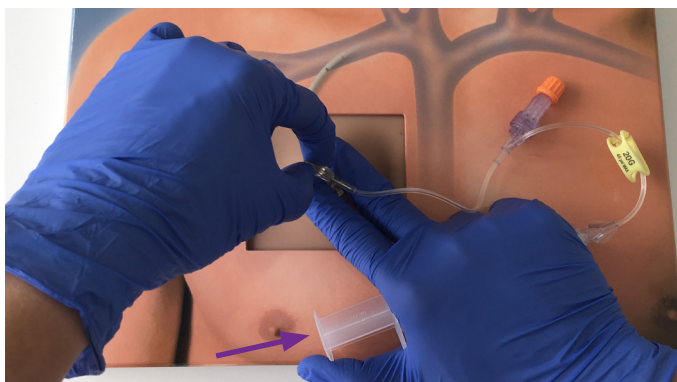

Avec la deuxième main, **SAISIR LES AILETTES DE PRÉHENSION** avec deux doigts.

3 RETIRER L'AIGUILLE TOUT EN EXERÇANT UNE PRESSION POSITIVE

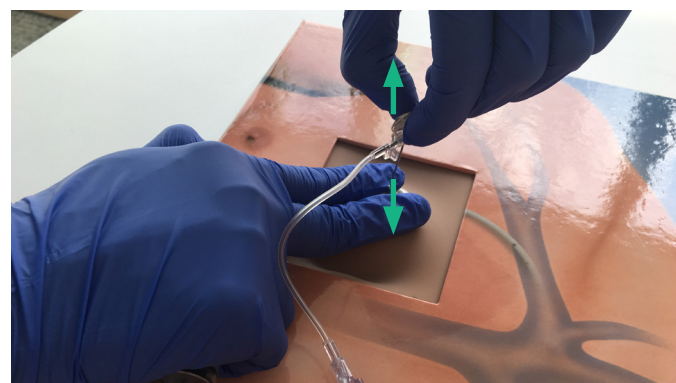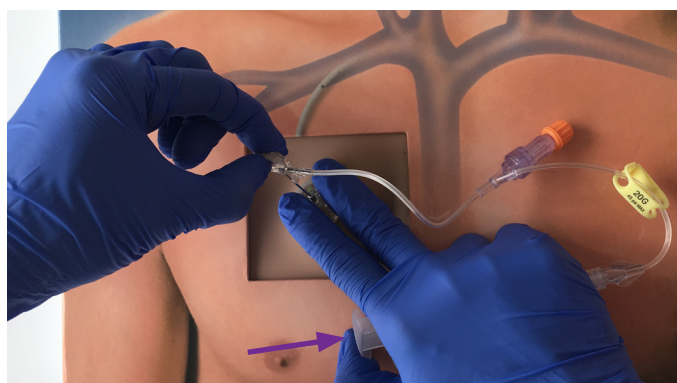

Avec la première main, exercer une pression positive en **APPUYANT SUR LA SERINGUE À L'AIDE DU POUCE**, tout en maintenant la base de l'aiguille avec l'index et le majeur. En parallèle la deuxième main **RETIRE L'AIGUILLE EN TIRANT FERMEMENT SUR LES AILETTES** jusqu'à entendre un clic et jusqu'à l'apparition du point vert confirmant l'activation de la sécurité. Éliminer l'ensemble dans un collecteur pour objets tranchants.

SURECAN® SAFETY II SANS VALVE



Longueur utile de l'aiguille

Taille de gauge	Volume d'amorçage (mL)	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	38 mm
■ 19G	0,31	04447042	04447000	04447001	04447002	04447003	04447004
■ 20G	0,25	04447043	04447005	04447006	04447007	04447008	04447009
■ 22G	0,19	04447044	04447010	04447011	04447012	04447013	-

SURECAN® SAFETY II AVEC VALVE CARESITE® EN Y



Longueur utile de l'aiguille

Taille de gauge	Volume d'amorçage (mL)	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	32 mm	38 mm
■ 19G	0,43	04447057	04447045	04447046	04447047	04447048	04447049
■ 20G	0,35	04447058	04447050	04447051	04447052	04447053	-
■ 22G	0,33	04447059	04447054	04447055	04447056	-	-

*CCI : Chambre à Cathéter Implantable

- (1) Prévention des infections associées aux chambres à cathéter implantables pour accès veineux, Recommandations professionnelles par consensus formalisé d'experts, Promoteur : SF2H, Volume XX - N° 1 - Mars 2012
- (2) CPIAS Centre Fiche technique Pose d'une chambre à cathéter implantable V5/2017
- (3) Réseau CClin-Arlin Gestion d'un cathéter à chambre implantable - CCI, Mai 2017

L'aiguille de sécurité à biseau non carottant pour injection sous pression Surecan® Safety II est destinée à être insérée dans le septum d'une chambre implantable sous-cutanée pour la perfusion de liquides. Le dispositif de sécurité de l'aiguille Surecan® Safety II est activé manuellement au cours du retrait de l'aiguille. Il est conçu pour la prévention des piqûres accidentelles par l'aiguille.

Dispositif médical de classe IIa. Certificat CE délivré par G-MED (CE 0459).

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage avant utilisation.

Pour les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux utilisés pour la perfusion à domicile dans le cadre des forfaits PERFADOM de la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), se reporter au site ameli.fr

Fabriqué par : B. Braun Medical, 26 rue Armengaud, 92210 Saint-Cloud.

Document réservé aux professionnels de santé.

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans l'accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. Document et photos non contractuels.

Edition Novembre 2023