


Guide de pose et de retrait du système de fixation griplok®



LA POSE

- 1 **Ouvrir**
le griplok®.

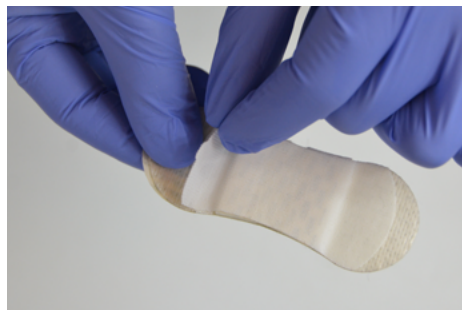

- 2 **Placer**
l'embase dans l'empreinte
et **retirer** la protection de
la partie supérieure.



- 3 **Rabattre**
la partie supérieure.



- 4 **Décoller**
l'une après l'autre les
protections inférieures afin
de fixer le griplok® à la peau.



LE RETRAIT

- 1 Après avoir **soulevé**
la partie supérieure du griplok®,
retirer délicatement l'embase
de son empreinte.



- 2 **Décoller**
le griplok®
de la peau.



griplok® est un dispositif médical stérile de classe I, conforme à la directive 93/42/CEE, selon l'annexe V. Certification établie par le G-MED, organisme notifié n°0459.
Dispositifs fabriqués et distribués par Vygon.

Pour plus d'informations, contactez-nous : questions@vygon.com

Vygon – 5, rue Adeline • 95440 ECOUEN • FRANCE

Reception: +33 (0)1.39.92.63.63

Service clients France: +33 (0)1.39.92.63.81 – Fax.: +33 (0)1.39.90.29.37

Export customer service: +33 (0)1.39.92.64.15 – Fax.: +33 (0)1.39.92.64.44


www.vygon.fr