


ÉTAPES DE LA POSE

AIGUILLE DE SÉCURITÉ


PPS® / PPS® CT

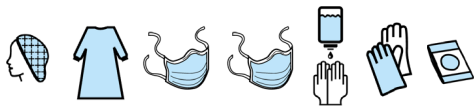


- Désinfecter la zone de ponction conformément au protocole de l'hôpital.
- Choisir la gauge en fonction de la viscosité du médicament à perfuser et du débit souhaité (recommandation SF2H 22G).
- Choisir la longueur de l'aiguille en fonction de la corpulence du patient.




Avant l'utilisation, il faut toujours purger l'aiguille et le prolongateur avec une seringue pré-remplie.

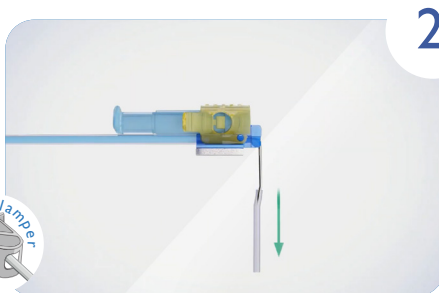

Retirer la protection de l'aiguille.

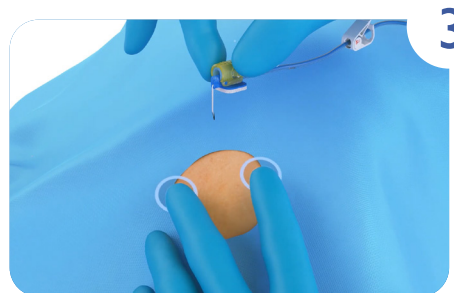

Localiser et maintenir la CCI avec vos doigts. Piquer le septum de la CCI à travers la peau. L'aiguille doit être perpendiculaire à la peau.

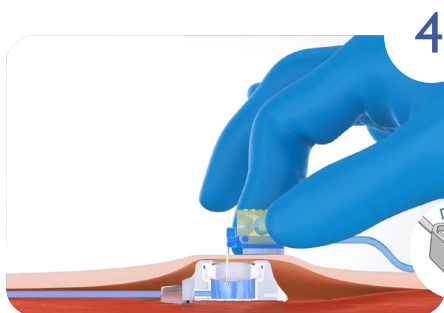

Vous devez pouvoir sentir le fond du réservoir avec la pointe de l'aiguille. Dès que vous sentez le fond du réservoir, arrêtez-vous afin d'éviter d'écraser la pointe de l'aiguille.



Avant de connecter la ligne de perfusion, vérifier la présence d'un reflux sanguin.



Rincer en utilisant la technique de rinçage pulsé.



Une mousse est fournie avec l'aiguille. Placez-la sous le piston pour assurer la stabilité et le confort du patient.



Il est recommandé d'utiliser des bandes adhésives pour améliorer la stabilisation de l'aiguille. Appliquez-en une sur la tête de l'aiguille et deux en croix sur le piston.



Appliquer un pansement transparent semi-perméable sur l'aiguille pour protéger et surveiller le point de ponction.



Value Life


Vidéo disponible ici :




POLYPERF® Safe et PPS® Quick

AIGUILLES DE HUBER SECURISÉES


ETAPES DE RETRAIT :

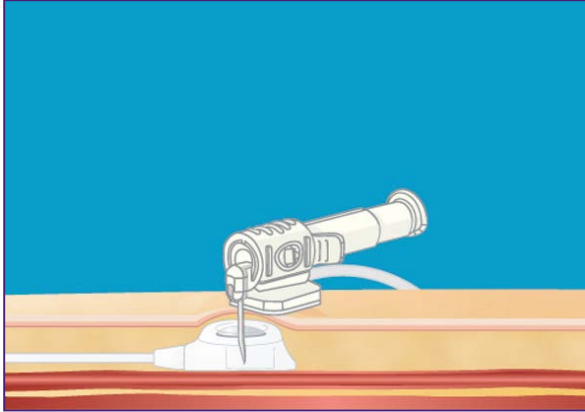

ETAPE 1 : Position d'utilisation habituelle (piston horizontal).

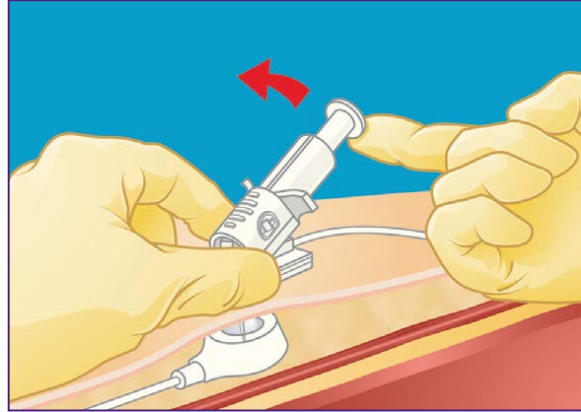

ETAPE 2 : Préparation : basculer le piston de la position horizontale à la position verticale.

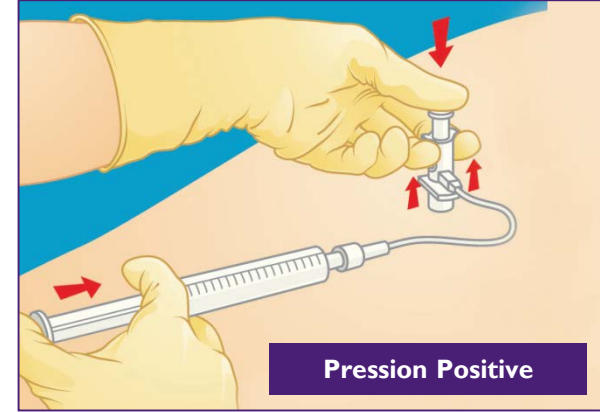

ETAPE 3 : A l'aide du pouce faire descendre le piston pour le mettre en contact avec la peau. Injecter du NaCl (=pression positive) à l'aide de la main controlatérale tout en relevant simultanément l'extracteur (mouvement de bas en haut) jusqu'au verrouillage total de l'aiguille : entendre un « CLIC ».

Cette dernière opération élimine tout risque de piqûre accidentelle.

- PROTECTION DE LA POINTE ET DU CORPS DE L'AIGUILLE
- PREVENTION DES OBSTRUCTIONS CHRONIQUES

POLYPERF® Safe et PPS® Quick permettent d'effectuer la pression positive lors du retrait de l'aiguille